

# VITASSAY

*Test rapide IC de  
l'antigène SARS-CoV-2*




- **Ecouvillons floqués NP inclus**
- **Recherche de l'antigène SARS-CoV-2**
- **Résultat en 10 minutes**
- **Sensibilité et spécificité élevée**

# VITASSAY SARS-CoV-2

Le test Vitassay SARS-CoV-2 est un test immunochromatographique rapide en une étape pour la détection qualitative du SARS-CoV-2 à partir d'écouvillons nasopharyngés floqués.

Le dosage immunologique est simple et hautement sensible pour poser un diagnostic présomptif d'une infection respiratoire par le virus SARS-CoV-2.

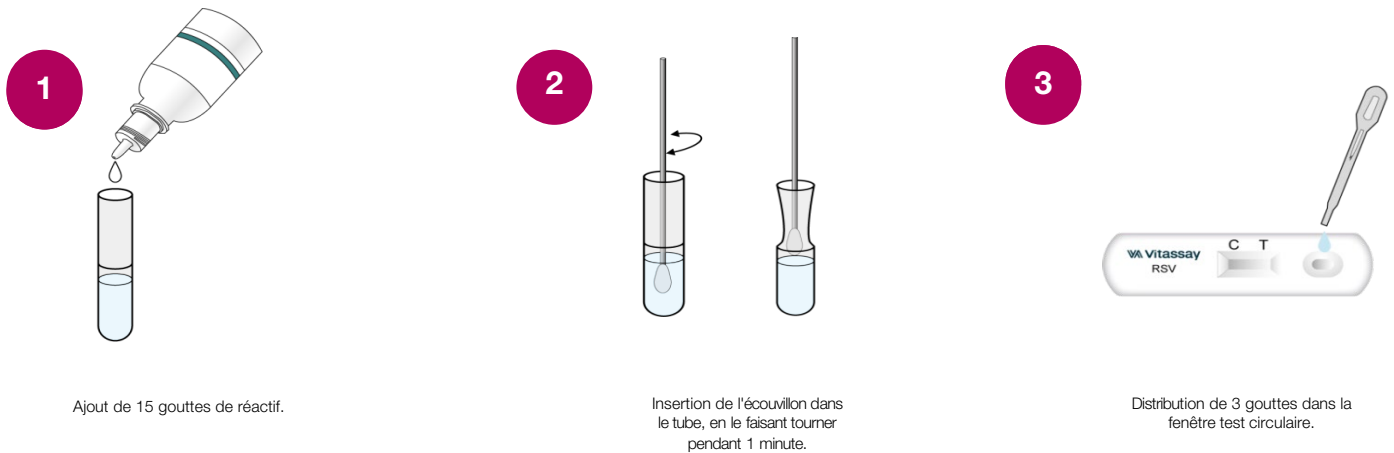

## Résultats



Afin de valider le test, la présence de bande contrôle est indispensable. Dans le cas contraire, refaire le test.

## Performances

Une évaluation indépendante sur 262 échantillons nasopharyngés de personnes suspectées d'être infectées par le virus SARS-CoV-2, a été réalisée en comparant les résultats obtenus par le test Vitassay SARS-CoV-2 par la technique RT-PCR. Cette étude a montré une **sensibilité** de **91,7 %** et une **spécificité** de **98,1 %**.

## Informations complémentaires



Le test Vitassay SARS-CoV-2 est enregistré auprès de l'ANSM et inscrit sur la liste de la DGS.

Le test différentiel de la grippe est possible avec le test Vitassay SARS-CoV-2+FluA+B+RSV+Adeno Resp.

Code produit	Désignation	Présentation
7355052	Vitassay SARS-CoV-2 (Coffret complet avec 25 écouvillons floqués NP)	25 tests
7715053	Vitassay SARS-CoV-2+FluA+B+RSV+Adeno Resp. (Coffret complet avec 10 écouvillons floqués NP)	10 tests

v1.0 JCB 11122020 - VIT104

**Royaume Uni**  
**Mast Group Ltd.**  
**Mast House**  
**Derby Road, Bootle**  
**Merseyside L20 1EA**

Tel: + 44 (0) 151 933 7277  
Fax: + 44 (0) 151 944 1332  
e-mail: sales@mast-group.com

**Allemagne**  
**Mast Diagnostica GmbH**  
**Feldstrasse 20**  
**DE-23858 Reinfeld**

Tel: + 49 (0) 4533 2007 0  
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68  
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

**France**  
**Mast Diagnostic**  
**12 Rue Jean-Jacques Mention**  
**CS 91106**  
**80011 Amiens CEDEX 1**

Tél. + 33 (0) 322 80 80 67  
Fax + 33 (0) 322 80 99 22  
e-mail: info@mast-diagnostic.fr